

頭部CTA

脳血管・提出する画像・ZIO作成ポイント

提出画像

必要に応じて以下のやつに+ α お願いします。


- ・ 単純 : Axi
- ・ Slab MIP(3-2) : 3 R
- ・ ZIO作成 (VR6回転 MIP2回転)

CTAのみ

- ・ 4D : Cor・SAG
- ・ Perfusion解析 (5枚)

Perfusion付き


脑血管

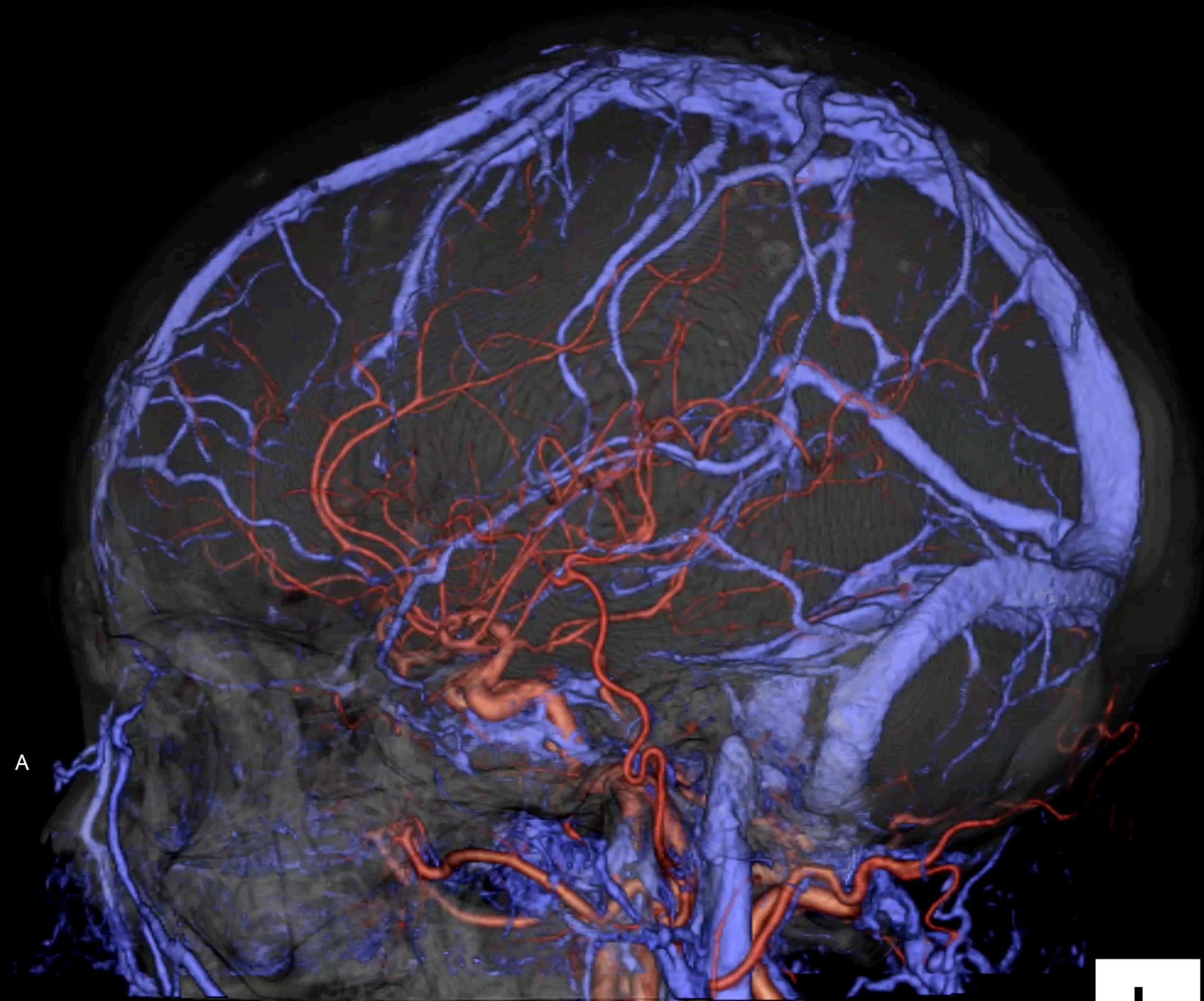

A

L

F

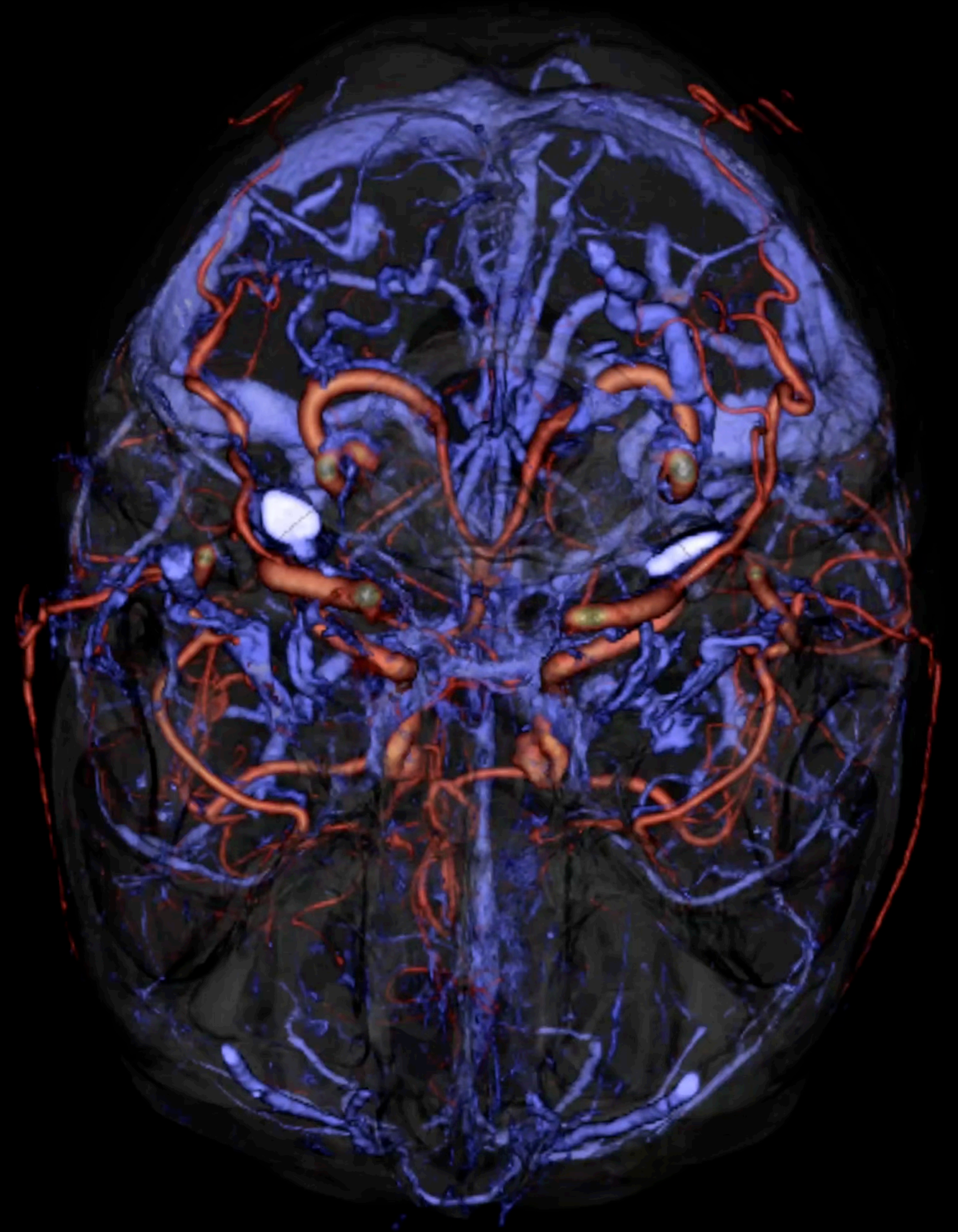

L

A

F

ZIO提出画像

1. VR横回転（Aから）
2. VR縦回転（Pから）
3. VR脳外用（Vから）
4. VR脳外用（45度奥に）
5. VR脳外用（45度奥に）
6. VR脳外用（45度奥に）
7. MPR横回転（Aから）
8. MPR縦回転（Aから）

ZIO作成ポイント

- ・血管/石灰化/骨/金属を分けて作成
- ・ウィンドウを上げて頭部固定具を外す
- ・骨作成時はトルコ鞍を中心に前床突起が入るように球で残すを使いくり抜く
- ・クリップやコイルがある場合は水色で加算
- ・回転時はOMに合わせる

＊頭部CTA作成時は分離やフィットを使用すると抹消の血管が無くなるので原則使用しない。